


Comment utiliser *Anapen*® ?



Vérification du dispositif

1- Tourner la bague pivotante pour aligner les lentilles sur les fenêtres d'inspection de la solution.

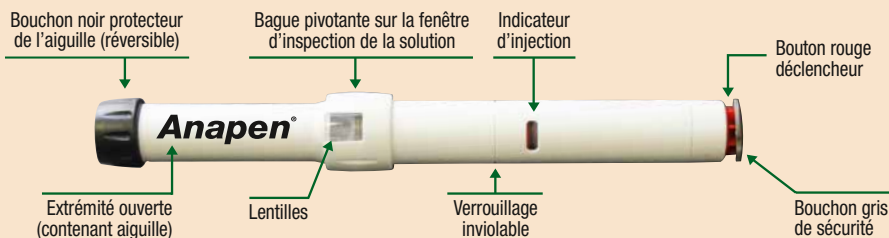

2- Vérifier que la solution est limpide et incolore à travers la fenêtre d'inspection. Si aspect trouble, coloré ou contient des particules, *Anapen*® doit être remplacé.



3- S'assurer que l'indicateur d'injection n'est pas rouge.



Cela signifie qu'il a déjà été déclenché et qu'il doit être éliminé.



4- Retourner la bague pivotante pour recouvrir les fenêtres d'inspection.

Utilisation d'*Anapen*®



A- Enlever le bouchon noir protecteur de l'aiguille en tirant fortement. Son retrait permet de retirer une gaine grise protégeant l'aiguille.



B- Enlever le bouchon gris de sécurité du bouchon rouge déclencheur en tirant.



C- Appuyer fermement le dispositif sur la face externe de la cuisse, puis appuyer sur le déclencheur de façon à entendre un « clic ».

Si nécessaire, l'injection peut être pratiquée à travers des vêtements légers.


Une injection accidentelle dans les mains ou les doigts peut provoquer un défaut d'irrigation sanguine du membre concerné. Consulter le service des urgences de l'hôpital le plus proche.



D- Maintenir en position pendant 10 secondes. Massez doucement le site d'injection.

10 secondes

Comment utiliser Anapen® ?

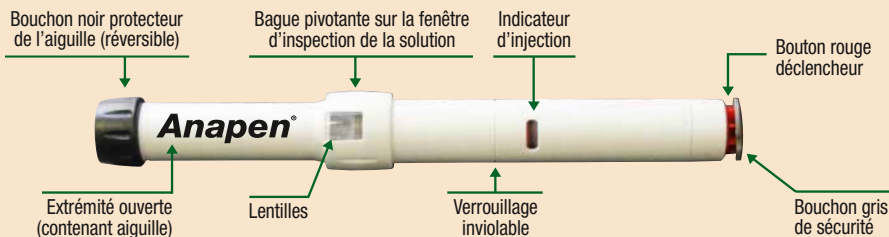

Après l'injection d'Anapen®



E- Vérifier que l'auto-injecteur est passé au rouge : l'injection est terminée. Si l'indicateur n'est pas rouge, recommencer avec un autre injecteur.

F- Après l'injection, l'aiguille dépasse du dispositif. Pour la recouvrir, replacer la partie large du bouchon noir protecteur de l'aiguille en l'enclenchant sur l'extrémité ouverte (contenant l'aiguille).

G- Une seconde injection peut être nécessaire si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent dans les 10 à 15 minutes qui suivent la première injection.

Immédiatement après avoir utilisé Anapen appelez le 15 ou le 112 et dites que vous faites un choc anaphylactique et que vous avez reçu une injection intramusculaire d'adrénaline.

Le professionnel de santé qui vous prendra en charge récupérera le stylo injectable utilisé.

Bon usage du médicament

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser Anapen.

Anapen est utilisé dans le traitement d'urgence des symptômes du choc anaphylactique.

Vous devez toujours avoir 2 stylos injecteurs avec vous en cas d'échec de la 1^{ère} injection ou si la dose n'est pas suffisante.

Notification des événements indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.